



Gebruikershandleiding

Opvouwbare Elektrische Rolstoel Kaigo Ultra Compact



Lees de instructies goed voor gebruik van de elektrische rolstoel.

1. Op/Uit vouwen


Opvouwen Stap 1:

Open de veiligheidsgesp, zie hieronder hoe de gesp er geopend uit moet zien.



Opvouwen Stap 2:

Houd met een hand de zitting vast, terwijl je met de andere hand de rugleuning naar voren duwt.

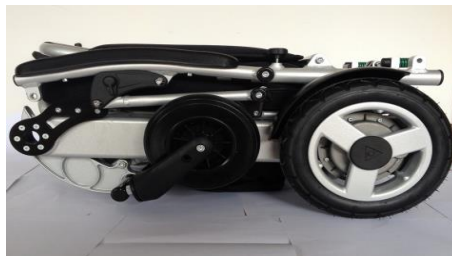

Uitvouwen Stap 1:

Trek de rugleuning omhoog terwijl je het onderstel van de rolstoel tegenhoudt.



Uitvouwen Stap 2:


Klik de veiligheidsgesp naar beneden toe op het slot.



2. De Joystick Controller installeren

Stap 1

Bevestig de controller aan de armléuning en draai de knop stevig vast.

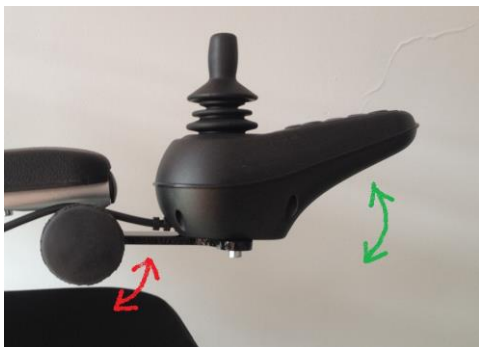

Stap 2


Plug de kabel van de controller in de kabel die naar de control box gaat. Let op dat de contacten in de stekker uitgelijnd zijn.



3. Arm leuning opklappen


Draai de knop tegen de klok in omhoog en til de armléuning omhoog.

Om de armléuning weer vast te zetten draai ja de knop met de klok mee naar beneden.

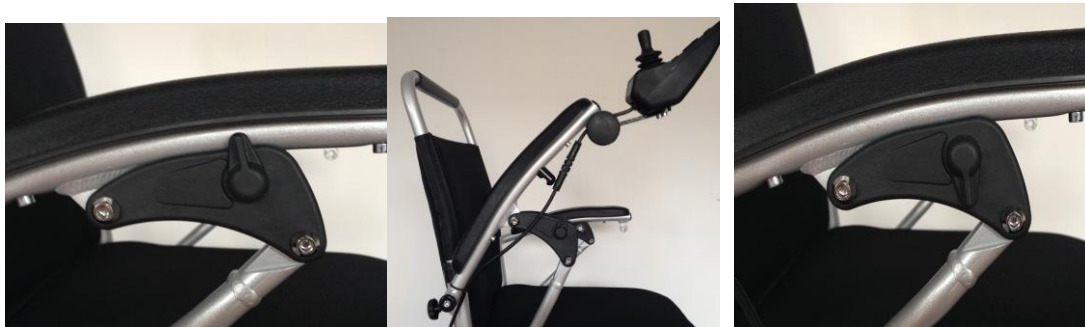

4. Handmatige bediening

Duw de rode hendel naar beneden zodat de rem loskomt van het wiel(Hierdoor staat het wiel in 'neutraal'). Nu kunnen de wielen vrij bewegen en kan de rolstoel handmatig geduwd worden.

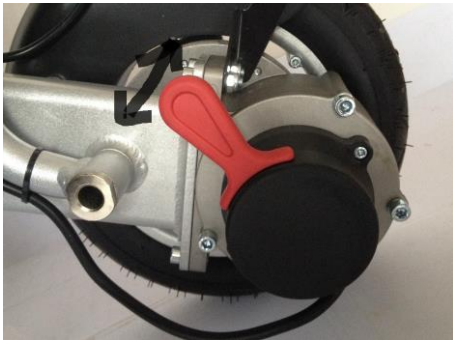

Als de rolstoel niet geduwd wordt maar met de motors bediend wordt, moeten de remmen in contact staan met de wielen(niet in 'neutraal'). Anders heft de bestuurder geen controle over de rolstoel.

5. Joystick bediening

1. Joystick:
Bestuurd de richting en snelheid.
2. Aan/Uit knop:
Indrukken om de rolstoel aan of uit te zetten
3. Batterij indicatie:
Groene leds geven aan hoeveel stroom de accu nog bevat.
4. Claxon:
Met de knop luidt de claxon.
5. Verhogen maximum snelheid:
Met + verhoogt de maximale snelheid,
6. Verlagen maximum snelheid:
Met – verlaagt de maximale snelheid.
7. Ingestelde snelheid:
Als alle lampjes branden betekend dit dat de maximale snelheid op zijn hoogst staat.



6. Opladen van de batterijen

Plug de oplader in de voorzijde van de joystick, Let op dat de contacten in de stekker uitgelijnd zijn.

Sluit de oplader aan op het stopcontact, nu gaat het laad lampje branden.

Rood betekend dat de batterijen worden opgeladen.

Groen betekend dat de batterijen zijn opgeladen.

7. Transport & Opslag

- Om de rolstoel op te tillen, zet hem eerst staande in de opgevouwen positie.
- Als de rolstoel is opgevouwen past deze in de meeste achterbakken.
- Als de rolstoel voor lange termijn wordt opgeslagen zorg er dan voor dat de batterijen volledig zijn opgeladen. Zorg ook voor een koele, donkere en goed geventileerde ruimte.
- Om schade aan de batterijen te voorkomen moeten deze op zijn minst 1x per 3 maanden opgeladen worden.

8. Veiligheids gids



De gebruiker moet van gezond verstand en oordeel zijn.
De gebruiker moet deze gebruikershandleiding lezen voordat hij de stoel bedient en vertrouwd raakt met de componenten en functies ervan.



De gebruiker moet rijvaardigheid oefenen met assistentie op open, vlakke en veilige gronden voor normaal gebruik.

Voorwaarts bewegen en stoppen

Om vooruit te gaan, duwt u de joystick licht naar voren.
Laat de joystick los om te stoppen.



Achterwaarts bewegen

De gebruiker moet zich bewust zijn van wat erachter zit voordat hij achteruit manoeuvreert om botsingen te voorkomen, duw de joystick licht naar achteren.



Draaien

Om te draaien duwt u de joystick naar links of rechts en let op wat er links of rechts is om botsingen te voorkomen.



Rijden in bochten

Duw de joystick lichtjes in de richting van de bocht. Oefen snelheidscontrole.



Oefen het vermijden van obstakels

Duw de joystick lichtjes in beide richtingen om te voorkomen en manoeuvreren rond de obstakels, oefen snelheidsregeling.



Snel rijden

Duw de joystick helemaal in de richting waarin u wilt gaan. Trek de joystick terug naar het midden als u niet het gevoel heeft dat u 100% controle hebt.



Over kleine opstakels rijden

Duw licht op de joystick en rijd langzaam over de stoeprand.
De stoep mag niet hoger zijn dan 4 centimeter



Bergopwaarts rijden

Houd je lichaam naar voren gekanteld om het centrum van zwaartekracht stabiel te houden. Rijd langzaam. We raden aan de helling minder dan 9 graden te behouden voor de beste prestaties.



De lift in en uit rijden

De gebruiker moet letten op de openings- en sluitingsintervallen van de liftdeur om botsingen te voorkomen bij het betreden of verlaten van de lift.



Rijden op trottoirs

De gebruiker moet op het trottoir blijven en vermijden dat hij de auto rijbaan betreedt, tenzij hij de straat oversteekt. Besteed aandacht aan obstakels en vermijd contact met hen.




De straat oversteken

Besteed aandacht aan het vermijden van auto's en passeer wanneer dat is toegestaan. Rijd langzaam om terug te komen op het trottoir, dat niet meer dan 3 cm hoog mag zijn.



Rijden over trein- / spoorwegrails

Steek geen trein- of spoorrails alleen over, we raden u aan om te worden vergezeld door een assistent.

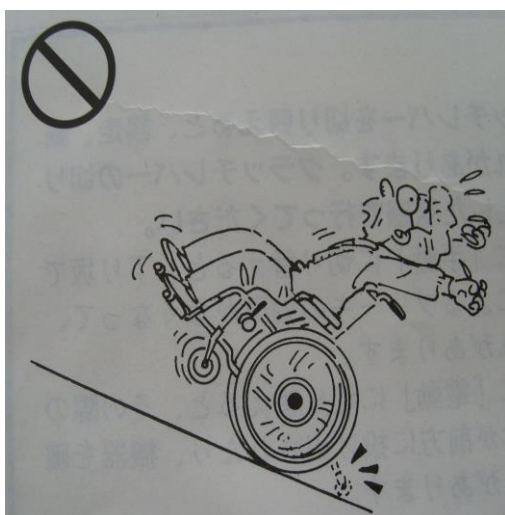

Rijden op een te steile helling kan resulteren in een kanteling of een ongeluk.



Rijden over een te hoge drempel / trede (meer dan 3 cm) kan leiden tot kantelen.



We raden de gebruiker aan om met behulp van assistentie uit en in de stoel te stappen. Verplaats de armleuningen en voetensteun uit de weg voordat u de stoel in en uit gaat.



Probeer het product niet zelf te repareren. Dit kan permanente schade aan de stoel veroorzaken en u kunt uzelf verwonden of de dood riskeren. Het moet worden gerepareerd door professioneel personeel.



Laat kinderen de rolstoel niet gebruiken



Spoel de stoel niet af met water of andere vloeistoffen. Het kan schade veroorzaken aan de stoel en kan ook uw persoonlijke veiligheid schaden of in gevaar brengen. Gebruik een vochtige doek om de rolstoel schoon te maken



Laat de batterij of elektrische componenten van de stoel niet achter in een auto die in de zon staat te bakken. Dit zal permanente schade veroorzaken. Dus houd het uit de buurt van vuur- en warmtebronnen.



Laat kinderen geen toegang krijgen tot de batterij of elektrische componenten van de stoel. Het moet worden bewaard op een koele, droge plaats waar kinderen geen toegang toe hebben.



Plaats geen objecten op of over de lader terwijl deze wordt opgeladen. Als de batterij heet wordt, vervormt of een geur afgeeft tijdens het opladen, stop dan onmiddellijk met laden.