


1




Open de beschermkap van de AeroChamber2go™ **A** en verwijder de beschermdop **B**.

2

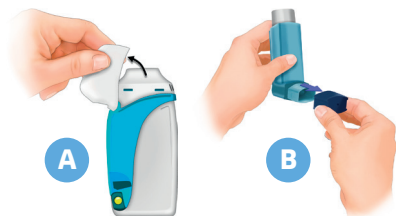


Schud de dosisaerosol goed.

3

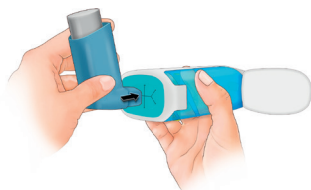


Plaats de dosisaerosol in de AeroChamber2go™.

4

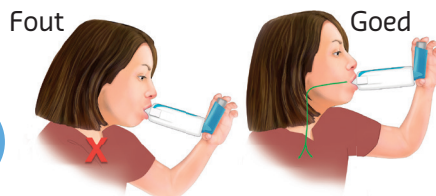

Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.

5

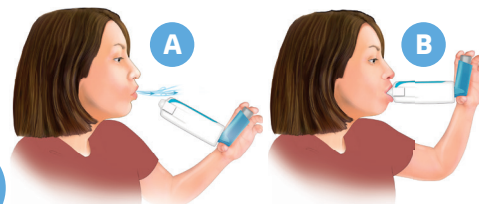

Adem volledig uit naast de AeroChamber2go™ **A**.
Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen **B**.

6



Druk de dosisaerosol één keer in.

7

1 tot 5x




Standaardmethode: vijf keer rustig in- en uitademen door de AeroChamber2go™.
1-teug-methode: inhaleer zo diep mogelijk met een gelijkmatige inademing en houd vervolgens de adem 10 tellen vast.

8

2 → 7

Herhaal bij meerdere doses de stappen 2 t/m 7.

9

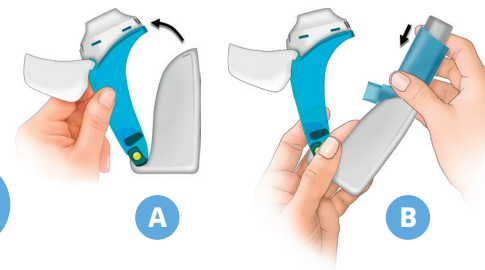

Open de beschermkap van de AeroChamber2go™ **A** en plaats de dosisaerosol zonder beschermdop in de AeroChamber2go™ **B**.

10



Sluit de beschermkap.

11



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Als de dosisaerosol langer dan een week niet is gebruikt, goed schudden en pas daarna één pufje in de lucht spuiten (bij een nieuwe dosisaerosol drie pufjes).



- De AeroChamber2go™ is bedoeld voor onderweg, niet voor thuis.




- Let op de vervaldatum (EXP). Vervang de AeroChamber2go™ eenmaal per jaar. Vooral het ventiel kan na verloop van tijd minder goed functioneren.



- Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur (niet in de badkamer of de keuken).

Reinigen

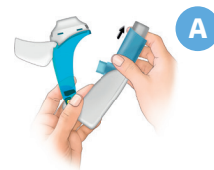

De AeroChamber2go™ eenmaal per week schoonmaken.

- Open de AeroChamber2go™ **A** en verwijder de dosisaerosol. Was alle onderdelen van de AeroChamber2go™ in een schoon sopje **B**.



- Afspoelen, goed uitschudden, niet afdrogen maar aan de lucht laten drogen.

Naam inhalator: **AeroChamber2go™**

Naam medicijn: _____

Categorie: _____

Tijdstip inname: _____

Dosis: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____